

Nom du patient :	Nom du contact :	Taille :	Poids :	Date :
Nom et adresse d'expédition :	Nom du compte :	N° du compte :	N° du bon de commande :	


## Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Legassist mollet et une Compreboot plus pied.

<input type="checkbox"/> Jambe droite	Mousse	Autre option pour le pied
<input type="checkbox"/> Jambe gauche	<input type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Wavefoam	<input type="checkbox"/> Medaboot sur-mesure (frais en sus)

**Remarque :** Si les plus grandes mesures de circonférence dépassent 60 cm, commander la taille super.

### Mesures de la circonférence (Face latérale de la jambe)

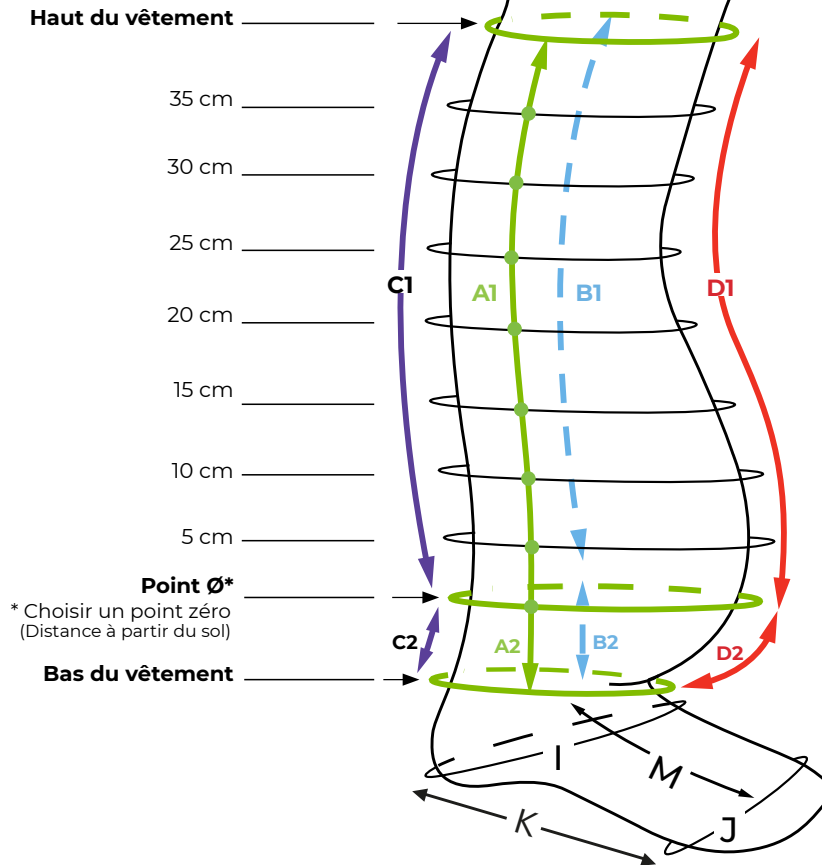

### Longueur circonférence

#### Latérale

A1 \_\_\_\_\_

A2 \_\_\_\_\_

#### Médiale

B1 \_\_\_\_\_

B2 \_\_\_\_\_

#### Postérieure

C1 \_\_\_\_\_

C2 \_\_\_\_\_

#### Antérieure

D1 \_\_\_\_\_

D2 \_\_\_\_\_

### Mesures du pied

I \_\_\_\_\_

J \_\_\_\_\_

K \_\_\_\_\_

M \_\_\_\_\_

**Important**

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

**Fournitures nécessaires**

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du mollet et pied (si applicable) avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : **Canadaorders@sigvaris.com**
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).
- Instructions pour les mesures et formulaires.

**INSTRUCTIONS**

Toutes les mesures doivent être prises en centimètres. Pour maintenir le ruban à mesurer en place, appliquer une légère tension.

**ÉTAPE 1 : Choisir le point zéro (point Ø)**

Le point zéro est unique au vêtement Legassist mollet et pied avec coquille. C'est le point de référence à partir duquel on prend toutes les autres mesures, afin de déterminer les longueurs nécessaires pour que le vêtement sur-mesure s'adapte à la forme unique de la cheville du patient. Encercler la jambe avec le bord inférieur du ruban à mesurer juste au-dessus de la coquille, à l'endroit le plus bas de la courbe du lobule de la cheville où le ruban peut être appliqué sans glisser. Tracer une ligne autour de la jambe le long du bord inférieur du ruban à mesurer à l'aide du stylo pour le corps SIGVARIS GROUP, et inscrire la circonférence sur la ligne du point Ø. Noter l'emplacement du point zéro en mesurant la distance depuis le sol.

**ÉTAPE 2 : Choisir l'endroit pour l'extrémité distale du vêtement – « bas du vêtement »**

Encercler la jambe avec le bord inférieur du ruban à mesurer, là où le lobule de la cheville touche la cheville ou le pied. Ne pas tirer sur le ruban sous la coquille. Marquer la jambe sur ce bord du ruban à mesurer sur les faces antérieure, médiale, postérieure et latérale, et inscrire la circonférence sur la ligne « Bas du vêtement ». La plus petite mesure pour la cheville ne convient pas pour ce produit. Le produit est conçu pour épouser et soulever le lobule de la cheville.

**ÉTAPE 3 : Choisir l'extrémité proximale du vêtement – « haut du vêtement »**

L'emplacement idéal pour le bord supérieur du vêtement est de deux largeurs de doigts sous le pli poplité, et à la hauteur de la tête fibulaire et de la tubérosité tibiale. Cependant, la position du haut du vêtement peut être personnalisée, si nécessaire, pour mieux se superposer à un SCL Legassist cuisse. Encercler la jambe avec le bord supérieur du ruban à mesurer à l'endroit souhaité. À l'aide du stylo pour le corps SIGVARIS GROUP, tracer une ligne autour de la jambe le long du bord supérieur du ruban, puis mesurer et inscrire la circonférence sur la ligne du haut du vêtement.

**ÉTAPE 4 : Mesurer et inscrire les longueurs**

Mesurer chacune des longueurs en dessous du point zéro, en suivant le contour de la jambe et de la cheville, mais sans pousser le ruban à mesurer dans les plis. Les longueurs mesurées à distance du point zéro doivent se terminer à l'endroit où le lobule de la cheville touche la cheville ou le pied au bas du vêtement; il ne faut pas étendre le ruban à mesurer sous le lobule. Inscrire les longueurs comme suit :

**Longueurs latérales (A) :**

A1 : Mesurer et inscrire la longueur latérale du point Ø au haut du vêtement

A2 : Mesurer et inscrire la longueur latérale du point Ø au bas du vêtement

**Longueurs médiales (B)**

B1 : Mesurer et inscrire la longueur médiale du point Ø au haut du vêtement

B2 : Mesurer et inscrire la longueur médiale du point Ø au bas du vêtement

**Longueurs postérieures (C)**

C1 : Mesurer et inscrire la longueur postérieure du point Ø au haut du vêtement

C2 : Mesurer et inscrire la longueur postérieure du point Ø au bas du vêtement

**Longueurs antérieures (D)**

D1 : Mesurer et inscrire la longueur antérieure du point Ø au haut du vêtement

D2 : Mesurer et inscrire la longueur antérieure du point Ø au bas du vêtement

## ÉTAPE 5 : Mesurer et inscrire les circonférences

Sur la face latérale de la jambe uniquement, marquer tous les 5 cm en allant vers le haut à partir du point zéro. Ensuite, inscrire les circonférences pour chaque point, en veillant à ce que le ruban à mesurer soit parallèle au sol.

## ÉTAPE 6 : Mesurer le pied

1. Mesurer la circonférence à partir de l'endroit où la coquille touche le cou-de-pied jusqu'à la pointe du talon et l'inscrire sur la ligne I.
2. Mesurer la circonférence du pied au niveau des têtes métatarsiennes et l'inscrire sur la ligne J.
3. Mesurer la longueur depuis la première tête métatarsienne jusqu'à la face postérieure du talon, et l'inscrire sur la ligne K.
4. Mesurer la longueur depuis la face dorsale de la troisième tête métatarsienne jusqu'à l'endroit où la coquille touche le cou-de-pied et l'inscrire sur la ligne M.

## ÉTAPE 7 : Photos

Une fois les mesures prises, prendre des photos de la jambe (avant, derrière, côtés) qui montrent tous les repères de mesures, ainsi que la forme générale de la jambe. Notre équipe d'experts pourra ainsi mieux personnaliser le vêtement en fonction des besoins individuels du patient. Envoyer les photos et les formulaires remplis par courriel à : [Canadaorders@sigvaris.com](mailto:Canadaorders@sigvaris.com). Ne pas oublier d'indiquer l'âge, la taille et le poids du patient, car cela permet également de personnaliser le vêtement.

## ÉTAPE 8 : Sélectionner les options supplémentaires

Vous êtes prêt à remplir vos formulaires et à passer la commande.

Choisir la jambe droite ou gauche

Choisir la taille : Si la plus grande mesure de circonférence de la jambe est supérieure à 60 cm, commander la taille super.

Choisir la mousse Flat ou Wavefoam (recommandé)

Choisir la Compreboot plus (incluse) ou la Medaboot sur-mesure (frais en sus)

### **PRENDRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES (REQUISES) APRÈS AVOIR INSCRIT LES REPÈRES DES MESURES.**

Envoyer par courriel à : [Canadaorders@sigvaris.com](mailto:Canadaorders@sigvaris.com).

Remarque : Legassist mollet et pied avec coquille est disponible en :

7099-BK Flatfoam, 7199-BK Wavefoam, 7299-BK Super, Flatfoam, 7399-BK Super, Wavefoam.