


Nom du patient :	Nom du contact :	Taille :	Poids :	Date :
Nom et adresse d'expédition :	Nom du compte :	N° du compte :	N° du bon de commande :	

Renseignements sur le produit

Le produit comprend un Legassist mollet et une Compreboot plus pied.

<input type="checkbox"/> Jambe droite	<input type="checkbox"/> Jambe gauche	Mousse	Autre option pour le pied
Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	<input type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Wavefoam	<input type="checkbox"/> Medaboot sur-mesure (frais supplémentaires)
<input type="checkbox"/> Jambe droite	<input type="checkbox"/> Jambe gauche	Mousse	Autre option pour le pied
Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	Taille : <input type="checkbox"/> Régulier <input type="checkbox"/> Super	<input type="checkbox"/> Flat <input type="checkbox"/> Wavefoam	<input type="checkbox"/> Medaboot sur-mesure (frais supplémentaires)

Remarque : Si les plus grandes mesures de circonférence dépassent 60 cm, commander la taille super.

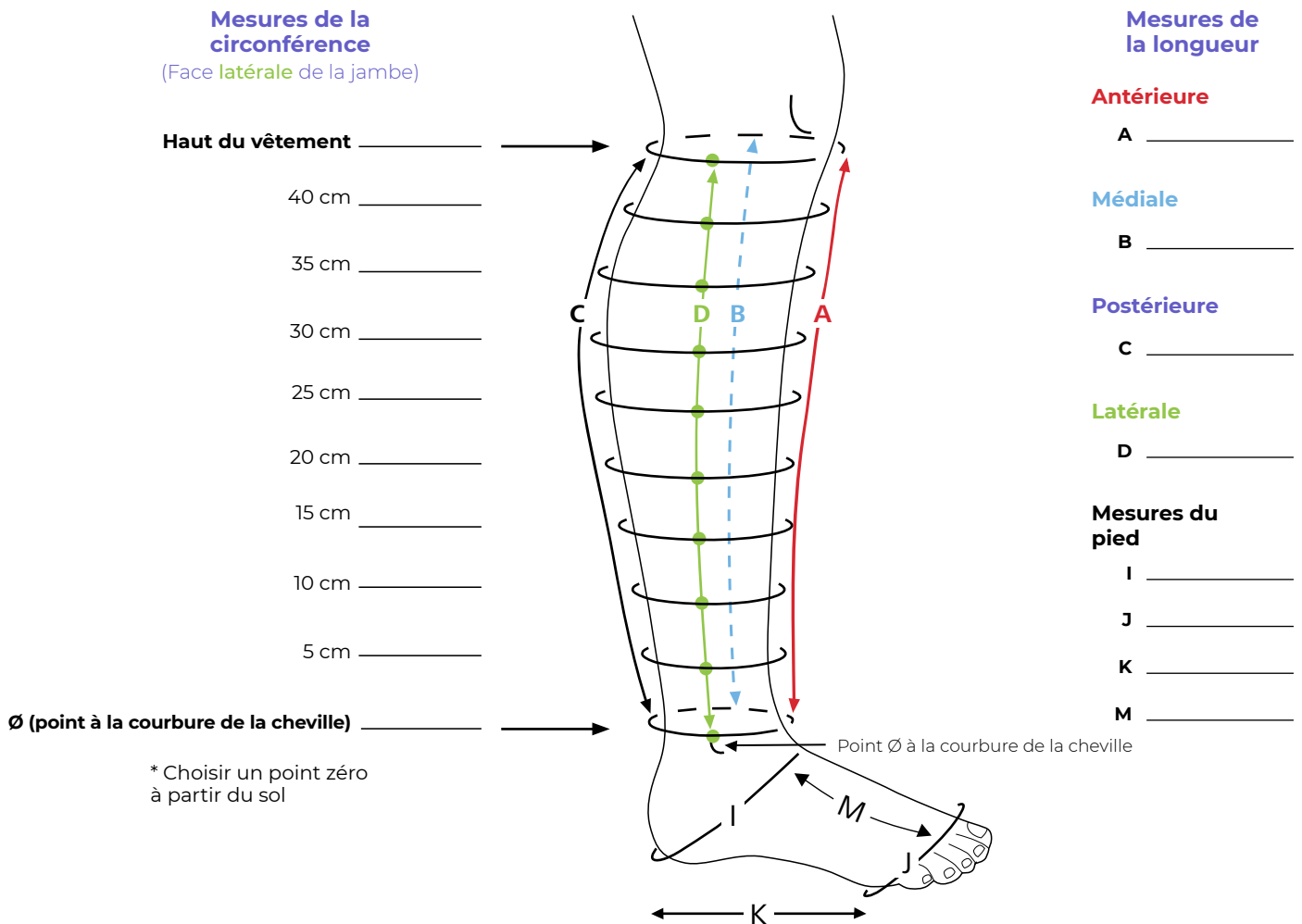

Instructions pour les mesures

canadaorders@sigvaris.com | P: 800-363-4999 · F: 800-263-8736

Important

La prise de mesures pour ce vêtement doit être très précise pour assurer un bon ajustement. Avant de commencer, veuillez communiquer avec le service à la clientèle ou votre gestionnaire de territoire Sigvaris pour obtenir plus d'informations.

Fournitures nécessaires

- Cellulaire doté d'un appareil photo. Des photos du mollet et pied (si applicable) avec les repères de mesures doivent être envoyées par courriel à : **Canadaorders@sigvaris.com**
- Ruban à mesurer SIGVARIS GROUP et stylo pour le corps (ou crayon pour les yeux).
- Formulaire de conditions générales pour les commandes sur-mesure dûment signé (à inclure avec la commande).
- Instructions pour les mesures et formulaires.

INSTRUCTIONS

Toutes les mesures doivent être prises en centimètres. Pour maintenir le ruban à mesurer en place, appliquer une légère tension.

ÉTAPE 1 : Localiser les repères

1. L'emplacement idéal pour le bord supérieur du vêtement est de deux largeurs de doigt sous le pli poplité, et à la hauteur de la tête fibulaire et de la tubérosité tibiale. Cependant, la position du haut du vêtement peut être personnalisée, si nécessaire, pour mieux se superposer à un SCL Legassist Cuisse. Encercler la jambe avec le bord supérieur du ruban à mesurer à l'endroit souhaité. À l'aide du stylo pour le corps SIGVARIS GROUP, tracer une ligne autour de la jambe le long du bord supérieur du ruban, puis mesurer et inscrire la circonférence sur la ligne du haut du vêtement.
2. Encercler la jambe avec le bord inférieur du ruban à mesurer en l'alignant avec la courbure de la cheville. Marquer la jambe sur ce bord du ruban sur les faces antérieure, médiale, postérieure et latérale, et inscrire la circonférence sur la ligne correspondant à la courbure de la cheville (point Ø).

ÉTAPE 2 : Localiser les positions de mesure pour la circonférence

1. En commençant par le « 0 » du ruban à mesurer au repère sur la face latérale de la courbure de la cheville, marquer la jambe par incréments de 5 cm jusqu'au repère sur la face latérale du haut du vêtement.

ÉTAPE 3 : Mesurer les longueurs

1. Mesurer la jambe à partir du repère sur la face antérieure de la courbure de la cheville jusqu'à la face antérieure du haut du vêtement et inscrire la longueur sur la ligne A.
2. Mesurer la jambe à partir du repère sur la face médiale de la courbure de la cheville jusqu'à la face médiale du haut du vêtement et inscrire la longueur sur la ligne B.
3. Mesurer la jambe à partir du repère sur la face postérieure de la courbure de la cheville jusqu'à la face postérieure du haut du vêtement et inscrire la longueur sur la ligne C.
4. Mesurer la jambe à partir du repère sur la face latérale de la courbure de la cheville jusqu'à la face latérale du haut du vêtement et inscrire la longueur sur la ligne D.

ÉTAPE 4 : Mesurer les circonférences

1. Encercler la jambe avec un ruban à mesurer à chaque repère situé entre la courbure de la cheville et le haut du vêtement, et inscrire chaque circonférence sur la ligne correspondant à chaque position.

ÉTAPE 5 : Mesurer le pied

1. Mesurer le pied du talon à la première tête métatarsienne (ou la longueur de botte désirée) et inscrire la longueur sur la ligne K.
2. Mesurer le dessus du pied de la troisième tête métatarsienne à la courbure de la cheville et inscrire la longueur sur la ligne M.
3. Encercler le cou-de-pied et la pointe du talon avec un ruban à mesurer et inscrire la circonférence sur la ligne I.
4. Encercler le pied au niveau des têtes métatarsiennes et inscrire la circonférence sur la ligne J.

PRENDRE DES PHOTOS NUMÉRIQUES (REQUISES) APRÈS AVOIR INSCRIT LES REPÈRES DES MESURES.

Envoyer par courriel à: **Canadaorders@sigvaris.com**.

Remarque : Legassist mollet et pied est disponible en :

7099-BK Flatfoam, 7199-BK Wavefoam, 7299-BK Super, Flatfoam, 7399-BK Super, Wavefoam.