

20-50
mmHg

PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- LYMPHŒDÈME
DU MEMBRE INFÉRIEUR
- ŒDÈME DE LA JAMBE

SIMPLE D'UTILISATION

- Application autonome et
ajustements aisés par scratches
- Entretien facile

CONFORTABLE

- Dispositif léger
- Texture douce*

PERSONNALISABLE

- Adaptable au volume de l'œdème
- Compression appliquée ajustable
- Association possible avec d'autres produits
pour ajuster le niveau de pression

Fiche de prise de mesures et informations
détaillées à télécharger sur www.sigvaris.com

COMPREFLEX NO FOOT

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



*COMPOSITION

39% Mousse de polyuréthane
28% Polyester - 24% Polyamide
5% Coton - 4% Elasthane

INCLUS

- Dispositif de compression
ajustable pour la jambe
COMPREFLEX
- Paire de chaussettes
protectrices en coton
- Indicateur de niveau
de compression ACCUTAB

UTILISATION POSSIBLE AVEC



COMPREFLEX
THIGH COMPONENT
(voir page 52)



COMPREFLEX
KNEE
(voir page 54)



COMPREFLEX
BOOT
(voir page 56)



COMPREFLEX
PLUS
(voir page 58)

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

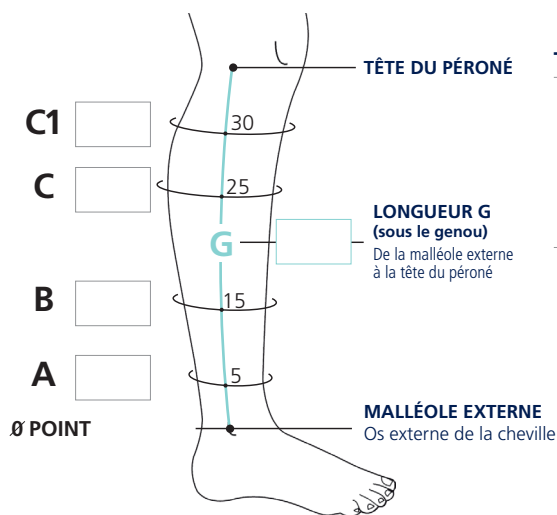


TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE					
Circonférences	C1	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64					
	C	29-39	34-44	40-50	46-56	54-64					
	B	24-34	29-39	34-44	39-49	44-55					
	A	19-26	21-30	26-36	31-41	36-46					
Longueur		NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG	NORMAL	LONG
	G	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42	30-33,9	34-42

Les chiffres (5, 15, 25, 30) indiquent la hauteur (en cm) par rapport au point Ø) à laquelle prendre la mesure de circonférence

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Noir	NORMAL	0745129309787	0745129309800	0745129309992	0745129310011	0745129310035
Noir	LONG	0745129309794	0745129309817	0745129310004	0745129310028	0745129310042

CONSEILS D'UTILISATION



■ Enfiler la chaussette protectrice en coton



■ Utiliser l'ACCUTAB afin de délivrer le niveau de pression souhaitée

■ Enrouler les scratchs sur eux-mêmes avant de positionner le produit

■ Enfiler le COMPREFLEX sur la jambe. La partie textile avant permet un bon positionnement du produit et facilite sa mise en place

■ De la cheville jusqu'au genou, refermer les scratchs.

Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux

Consultez les contre-indications de ce produit en page 12.