

Compreflex Standard Calf

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE


PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Œdème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Ulcère
- Lymphœdème
- Lipœdème

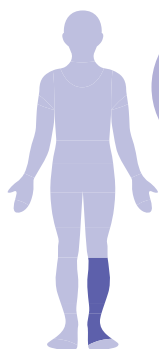

21-46
mmHg



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



SIMPLE D'UTILISATION

- Installation facile
- Ajustements aisés par scratchs
- Durable et lavable en machine

PRESSION AJUSTABLE

- Réglable selon 3 niveaux de pression
- Adaptable au volume de l'œdème
- Association possible avec d'autres produits

MATIÈRE DOUCE ET SOUPLE

- Dispositif léger
- Évacuation de l'humidité

COMPOSITION

37% polyamide - 27% mousse de
polyuréthane - 26% coton
6% élasthanne - 4% polyester

INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour la jambe
Compreflex Standard Calf
- Paire de chaussettes protectrices en coton
- Indicateur de niveau de compression Accutab

UTILISATION POSSIBLE AVEC



Compreflex
Standard Thigh
(voir page 32)



Compreflex
Standard Knee
(voir page 30)



Compreboot
Standard Foot
(voir page 34)




Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Compreflex Standard Calf

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA JAMBE

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

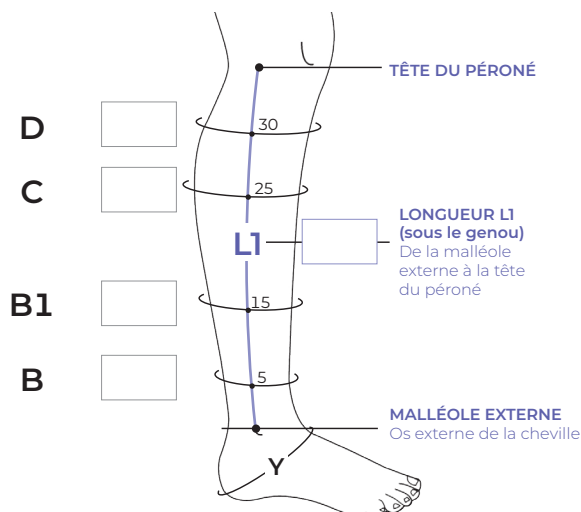

Les chiffres (5, 15, 25, 30) indiquent la hauteur (en cm) par rapport au point Ø) à laquelle prendre la mesure de circonférence

Compreflex Standard Calf (B-D)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Circonférences	D	29-39 cm	34-44 cm	40-50 cm	46-56 cm	54-64 cm
	C	29-39 cm	34-44 cm	40-50 cm	46-56 cm	54-64 cm
	B1	24-34 cm	29-39 cm	34-44 cm	39-49 cm	44-55 cm
	B	19-26 cm	21-30 cm	26-36 cm	31-41 cm	36-46 cm
Longueur	L1	REGULAR: 30-33.9 cm TALL: 34-42 cm				

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE	XLARGE	XXLARGE
Noir	REGULAR	0745129283155	0745129283179	0745129283193	0745129283216	0745129283230
Noir	TALL	0745129283162	0745129283186	0745129283209	0745129283223	0745129283247

CONSEILS D'UTILISATION



- Enfiler la chaussette protectrice en coton.
- Enrouler les scratchs sur eux-mêmes avant de positionner le produit.
- Enfiler le Compreflex sur la jambe. La partie textile avant permet un bon positionnement du produit et facilite sa mise en place.
- Du bas vers le haut, refermer les scratchs sans exercer de compression. Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux.
- Utiliser les Accutab afin de délivrer le niveau de pression souhaitée : Fixer une languette Accutab à chaque extrémité des scratchs, tirer chaque attache velcro au niveau de l'intervalle de compression souhaité indiqué sur la languette.

Consultez les contre-indications de ce produit en page 25.