

Compreflex Standard Thigh

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA CUISSE

PHASES INTENSIVE
ET MAINTIEN

DIURNE - NOCTURNE

STADES 1 ET 2

INDICATIONS

- Œdème (en cas de Maladie Veineuse Chronique, immobilisation, post-chirurgie)
- Ulcère
- Lymphœdème
- Lipœdème

SIMPLE D'UTILISATION

- Installation facile
- Ajustements aisés par scratches
- Durable et lavable en machine

PRESSION AJUSTABLE

- Réglable selon 3 niveaux de pression
- Adaptable au volume de l'œdème
- Association possible avec d'autres produits

MATIÈRE DOUCE ET SOUPLE

- Dispositif léger
- Évacuation de l'humidité

COMPOSITION

45% Coton - 14% Mousse de polyuréthane
28% Polyamide - 9% Néoprène
4% Elasthanne


UTILISATION POSSIBLE AVEC



Compreflex
Standard Knee
(voir page 30)



Compreflex
Standard Calf & Foot
(voir page 26)

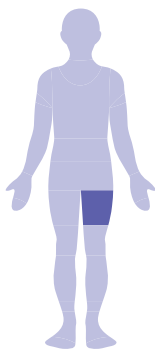

20-50
mmHg



SCRATCHS



MATIÈRE
RESPIRANTE



INCLUS

- Dispositif de compression ajustable pour la cuisse Compreflex Standard Thigh
- Paire de sous couche de protection en coton
- Ceinture pour la taille
- Indicateur de niveau de compression Accutab




Fiche de prise de mesures et
informations détaillées à télécharger sur
www.sigvaris.com

Compreflex Standard Thigh

DISPOSITIF DE COMPRESSION AJUSTABLE
POUR LA CUISSE

PRISE DE MESURES ET TAILLAGE

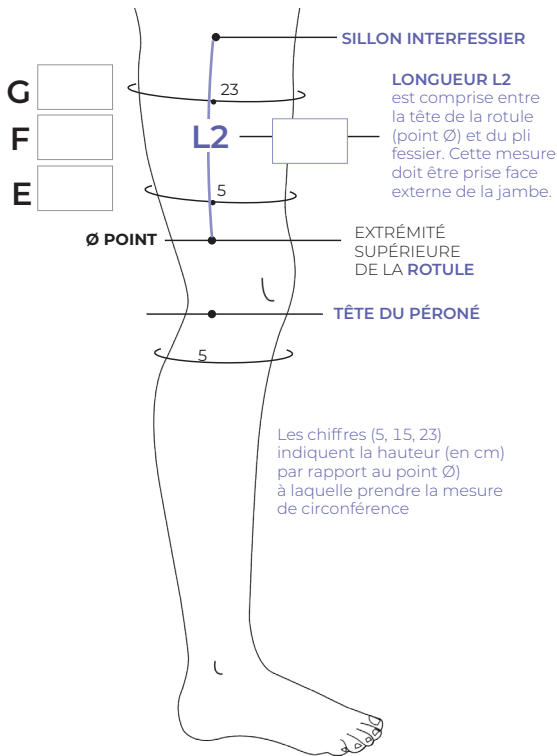

Compreflex Standard Thigh (E-G)

TABLEAU DE TAILLAGE (cm)

		SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Circonférences	G	48-58 cm	56-66 cm	64-74 cm	74-84 cm
	F	43-53 cm	51-61 cm	58-68 cm	68-78 cm
	E	38-48 cm	46-56 cm	53-63 cm	63-73 cm
Longueur	L2	REGULAR: 20-24.9 cm		TALL: 25-30 cm	

Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale

Pour commander, merci d'utiliser impérativement les codes à 13 chiffres sans oublier le "0".

	COLORIS	TAILLE	SMALL	MEDIUM	LARGE
CUISSÉ DROITE	Noir	REGULAR	0745129283438	0745129283452	0745129283476
	Noir	TALL	0745129283445	0745129283469	0745129283483
CUISSÉ GAUCHE	Noir	REGULAR	0745129283353	0745129283377	0745129283391
	Noir	TALL	0745129283360	0745129283384	0745129283407

CONSEILS D'UTILISATION

- Enfiler la sous couche de protection en coton sur la cuisse
- Enrouler les scratchs sur eux-mêmes avant de positionner le produit
- Enfiler le Compreflex Standard Thigh sur la jambe. La partie textile avant permet un bon positionnement du produit et facilite sa mise en place
- Du bas vers le haut, refermer les scratchs sans exercer de compression. Ces derniers doivent être correctement positionnés : pas de chevauchement et d'espace entre eux
- Utiliser les Accutab afin de délivrer le niveau de pression souhaitée : Fixer une languette Accutab à chaque extrémité des scratchs, tirer chaque attache velcro au niveau de l'intervalle de compression souhaité indiqué sur la languette
- Placer la ceinture autour de la taille, elle peut être coupée à la longueur désirée
- Fixer la partie large de l'attache à la ceinture et fixer la partie étroite de l'attache sur le Compreflex Standard Thigh en ajustant la tension

Consultez les contre-indications de ce produit en page 25.